


保護者の皆様へ

ぎょうちゆう 蟯虫卵検査のお知らせ

お子様の健康を守るため、蟯虫卵検査を行います。蟯虫は睡眠不足・神経質・学力低下・局部炎症を起こすなどの害がありますので、園児・児童全員が期日中に必ず検査を受けられるように、ご家庭のご協力をお願いします。

【検査用セロファンの使用法について】

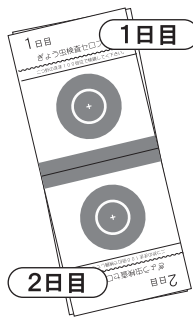

◀ 検査用セロファン

このセロファンは、2日間に渡り2回卵をとり、検査をするものです。

【注意】

- ・蟯虫は夜中に出てきて肛門のまわりに卵を産みますので、**朝起きた時すぐに卵をとります。(※用便前)**
- ・中のセロファンには特殊薬が塗ってありますので、使用する時以外は開かないようにしてください。


【初日】

初日の朝は、1日目のカバーを開いて○印(特殊糊のついた青色部分)を肛門にあて、セロファンの上から強く指先で押さえて卵をとり、元通りカバーをします。

【2日目】

翌日の朝は、2日目のカバーを開いて初日と同じ要領で卵をとります。卵を取り終わったら、カバーを全部はずして捨て、1日目と2日目の○印の糊どおしを貼り合わせて所定の袋に入れ、提出してください。

2日間の卵が一度に検査されます

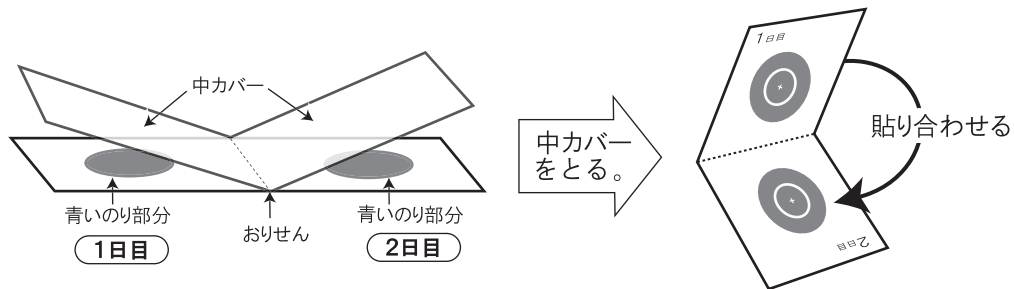

登録衛生検査所 有研